

IT


Soloc Buckle - SBuck



Avvertenze

- La fibbia Soloc è progettata per la cintura addominale di una carrozzina. Lei ha scelto di acquistarla singolarmente, quindi è Sua responsabilità garantire che la cintura usata abbia i requisiti di sicurezza necessari.
- La fibbia Soloc è progettata esclusivamente per mantenere una postura sicura, non come metodo di ritenuta.
- IN NESSUN CASO deve essere usata come unico metodo per assicurare una persona a una carrozzina durante il trasporto in un veicolo a motore. Quando si trasporta una persona in carrozzina con un veicolo, è obbligatorio usare un adeguato sistema di contenimento del passeggero e di fissaggio della carrozzina (WTORS) a quattro punti insieme a un adeguato sistema di ritenuta del passeggero a tre punti per garantire un viaggio in sicurezza.
- La fibbia Soloc deve essere prescritta e montata da un operatore sanitario qualificato, che deve verificare se è posizionata correttamente e se la cinghia passa nel punto giusto ed è regolata bene. La cintura deve essere usata solo dalla persona per la quale è stata preparata.
- La fibbia Soloc è studiata per un solo occupante di peso inferiore a 100 kg.
- Non modificare né alterare in nessun modo la fibbia.
- Prima dell'uso, raccomandiamo di controllare il corretto funzionamento della fibbia.
- Il perno si aggancia alla fibbia grazie a delle calamite. Pertanto, è bene assicurarsi che non si creino interferenze con eventuali dispositivi sensibili ai campi magnetici. La fibbia deve trovarsi ad almeno 50 mm da un pacemaker o altro dispositivo elettronico.
- Consigliamo conservare il numero di lotto indicato sull'imballaggio tra i documenti della cintura per riferimento futuro.

Parti

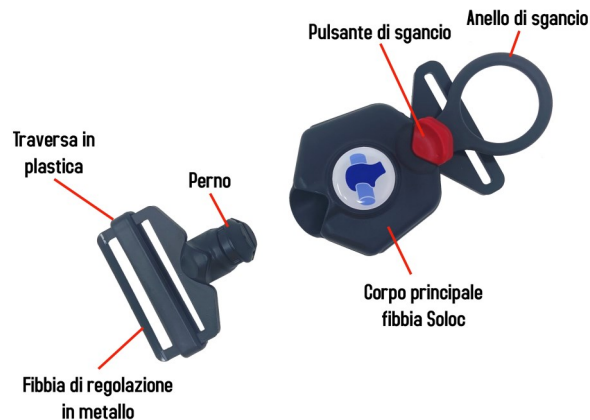

Come usare la fibbia Soloc

Per chiudere la fibbia Soloc, basta avvicinare il perno al corpo principale. La chiusura comporta un aggancio fisico: le calamite aiutano solo a completare l'operazione.

La fibbia è in sicurezza quando la linguetta rossa non è più nella posizione di sgancio. Non deve esserci spazio tra la linguetta rossa di sgancio e la fibbia.

Per aprire la fibbia, premere il pulsante di sgancio o tirare l'anello.

Per garantire il corretto funzionamento della fibbia Soloc, la cintura deve avere uno spessore specifico, e cioè tra 1,1 e 1,3 mm. Le fessure sono studiate per cinghie larghe 50 mm.

IT

Soloc Buckle- SBuck



Informazioni Utilizzatore / Assistente - Leggere prima dell'uso

- Si raccomanda di ispezionare la fibbia ogni giorno. Se si notano dei difetti, NON usarla e contattare il produttore.
- La fibbia Soloc possono essere pulite con un panno umido, un detergente delicato e dell'acqua tiepida. Non lavare in lavatrice. Non immergere in acqua. Se nel corpo principale della fibbia o nel perno entra dell'acqua, farla sgocciolare e lasciare la parte ad asciugare per 24 ore in un luogo ventilato. È bene notare che l'esterno può asciugare velocemente ma l'interno impiegherà più tempo.
- Si raccomanda di ispezionare la fibbia Soloc prima dell'uso per verificare se funziona correttamente. Controllare se il pulsante e l'anello di sgancio si aprono e si chiudono senza problemi e se l'unità si chiude senza fare più forza del necessario. Sistemare la fibbia se l'anello di sgancio tocca l'imbottitura.
- Controllare se il perno entra nell'unità principale senza fare troppa forza. Una volta avvicinate le due parti, le calamite interne favoriscono l'aggancio. In caso contrario, non fare forza: controllare se dentro l'apertura e sul perno c'è dello sporco. Per toglierlo, passare il perno con un panno e usare un oggetto morbido, come un bastoncino di cotone, per pulire il buco nella fibbia.

The Active Hands Company - Unit 4, Rumbush Farm Business Park,
322A Rumbush Lane, Earlswood, Solihull B94 5LW, UK

Tel: +44 (0)1564 702 255

E-mail: soloc@activehands.com

www.activehands.com

Testato per:
ISO 9001
ISO 16840-3
ISO 16840-10

