

Regolazioni

Dal momento che la posizione e la tensione della cintura pelvica sono estremamente importanti per un uso corretto, è bene assicurarsi che tutti i cinghiali siano regolati in modo adeguato e usare un'imbottitura.

Se la cintura è troppo stretta, può causare all'utilizzatore un inutile fastidio o disagio. Se, invece, è troppo larga, può girarsi in avanti o indietro e non servire all'uso previsto. Se la cintura è messa male, la leva di sgancio può entrare in contatto con una parte rigida dell'abbigliamento (ad es., un grosso bottone o la fibbia di una cintura) o incastrarsi nell'imbottitura e azionarsi accidentalmente aprendo la fibbia. Se l'utilizzatore mostra continui segni di fastidio o disagio a causa della cintura Freedom, è bene consultare immediatamente un operatore sanitario qualificato.

Informazioni Utilizzatore / Assistente - Leggere prima dell'uso

- Le cinghie o le imbracature sono i primi elementi da allacciare appena l'utilizzatore è seduto sulla carrozzina e gli ultimi da aprire o togliere prima che si alzi. Non muovere la carrozzina con la cintura sganciata perché può incastrarsi nelle ruote e rovinarsi.
- Si raccomanda di ispezionare la cintura ogni giorno. Se si notano dei difetti, NON usarla e contattare il produttore.
- Può essere necessario regolare la lunghezza della cintura Freedom per adeguarla alla crescita dell'utilizzatore, a eventuali cambiamenti nella sua disabilità o all'abbigliamento usato in base alla stagione. La cintura Freedom può essere regolata scegliendo un buco diverso. Le prolunghie possono essere acquistate su Active Hands.
- Se la cintura non è regolata bene può causare fastidi e fare male. Si raccomanda di controllare se l'utilizzatore mostra segni, arrossamenti, lividi o ferite nelle zone del corpo a contatto con la cintura.
- La fibbia e l'imbottitura possono essere pulite con un panno umido, un detergente delicato e dell'acqua tiepida. Non lavare in lavatrice. Non immergere in acqua. Se nel corpo principale della fibbia o nel perno entra dell'acqua, farla sgocciolare e lasciare la parte ad asciugare per 24 ore in un luogo ventilato. È bene notare che l'esterno può asciugare velocemente ma l'interno impiegherà più tempo.
- Se sono molto sporche, è possibile togliere i bracci FlexiFix dalla carrozzina e il rivestimento dell'imbottitura per lavarli. Raccomandiamo di far rimontare i bracci da un professionista esperto.
- Si raccomanda di ispezionare la fibbia Soloc prima dell'uso per verificare se funziona correttamente. Controllare se il pulsante e l'anello di sgancio si aprono e si chiudono senza problemi e se l'unità si chiude senza fare più forza del necessario. Sistemare la fibbia se l'anello di sgancio tocca l'imbottitura.
- Controllare se il perno entra nell'unità principale senza fare troppa forza. Una volta avvicinate le due parti, le calamite interne favoriscono l'aggancio. In caso contrario, non fare forza: controllare se dentro l'apertura e sul perno c'è dello sporco. Per toglierlo, passare il perno con un panno e usare un oggetto morbido, come un bastoncino di cotone, per pulire il buco nella fibbia.

The Active Hands Company - Unit 4, Rumbush Farm Business Park, 322A
Rumbush Lane, Earlswood, Solihull B94 5LW, UK

Tel: +44 (0)1564 702 255

E-mail: soloc@activehands.com

www.activehands.com

Avvertenze

- La cintura Freedom è progettata esclusivamente per mantenere una postura sicura, non come metodo di ritenuta.
- IN NESSUN CASO deve essere usata come unico metodo per assicurare una persona a una carrozzina durante il trasporto in un veicolo a motore. Quando si trasporta una persona in carrozzina con un veicolo, è obbligatorio usare un adeguato sistema di contenimento del passeggero e di fissaggio della carrozzina (WTORS) a quattro punti insieme a un adeguato sistema di ritenuta del passeggero a tre punti per garantire un viaggio in sicurezza.
- La cintura Freedom deve essere prescritta e montata da un operatore sanitario qualificato, che deve verificare se è posizionata correttamente e se la cinghia passa nel punto giusto ed è regolata bene. La cintura deve essere usata solo dalla persona per la quale è stata preparata.
- È fondamentale che abbia la giusta tensione (v. sezione Regolazioni).
- La cintura Freedom con fibbia Soloc è studiata per un solo occupante di peso inferiore a 100 kg.
- Non modificare né alterare in nessun modo la cintura o la fibbia.
- Prima dell'uso, raccomandiamo di controllare il corretto funzionamento della cintura (v. la sezione Informazioni per l'Utilizzatore / l'Assistente).
- Il perno si aggancia alla fibbia grazie a delle calamite. Pertanto, è bene assicurarsi che non si creino interferenze con eventuali dispositivi sensibili ai campi magnetici. La fibbia deve trovarsi ad almeno 50 mm da un pacemaker o altro dispositivo elettronico.
- Consigliamo conservare il numero di lotto indicato sull'imballaggio tra i documenti della cintura per riferimento futuro.

Parti



IT

Soloc Freedom - SFree Manuale d'uso



Come usare la cintura Freedom

La cintura Freedom è stata progettata per persone che hanno una funzione della mano molto limitata o nulla, o una diversità negli arti.

Per chiudere la cintura abbassare il braccio FlexiFix con la fibbia Soloc. Poi abbassare l'altro braccio FlexiFix in modo da avvicinare il perno al buco della fibbia. A questo punto le calamite uniscono le due parti, che si agganciano fisicamente. N.B.: la chiusura comporta un aggancio fisico. Le calamite servono solo a unire le due parti della cintura.

La fibbia è in sicurezza quando la linguetta rossa non è più nella posizione di sgancio. Non deve esserci spazio tra la linguetta rossa di sgancio e la fibbia.

Per aprire la fibbia, premere il pulsante o tirare l'anello di sgancio a seconda della funzione della mano.

Assicurarsi che l'imbottitura sul lato fibbia non si impigli nell'anello di sgancio tenendolo aperto. In caso, è possibile sistemare la posizione della fibbia regolando il velcro che la tiene ferma. È anche possibile spostare l'imbottitura sul braccio FlexiFix se regolato corto.

Montare i bracci Freedom sulla carrozzina

Raccomandiamo di far montare la cintura da un professionista esperto. In ogni caso, assicurarsi di avere prima ottenuto l'autorizzazione del proprietario della carrozzina.

Prima di tutto, bisogna stabilire la posizione più indicata per la cintura Connect in base alla disabilità dell'utilizzatore e al tipo di carrozzina. Si raccomanda di montare la cintura con l'utilizzatore seduto sulla carrozzina e la cintura nella posizione prevista.

Il braccio FlexiFix deve essere montato in modo che la fibbia e il perno rimangano in alto quando chiusi.

I bracci Freedom hanno molti buchi di aggancio. Posizionarli in modo che la fibbia si trovi al centro quando l'utilizzatore è seduto. Poi usare il buco più vicino alla carrozzina per fissare ogni braccio. Se il braccio non è abbastanza lungo, sono disponibili delle prolunghie. Raccomandiamo di usare solo una prolunga per lato.

Il braccio FlexiFix può essere agganciato direttamente a uno degli appositi buchi nel telaio.

Se la carrozzina non ha buchi di aggancio, usare un morsetto apposito, che può essere acquistato separatamente su Active Hands.



Per montare il morsetto, misurare il diametro del telaio nel punto in cui si vuole montare la cintura. Per un telaio di 25 mm, usare solo l'anello esterno. Per un telaio di 22 mm, inserire l'anello mostrato nella Figura 1.

Se si usa l'anello interno, inserirlo nel morsetto con la fessura verso l'apertura (Fig. 2). Infilare il morsetto sul telaio nel punto in cui si vuole montare la cintura. Mettere la vite M6 (inclusa) nel buco del braccio FlexiFix che si è scelto e nel morsetto (Fig. 3). Quando il morsetto si trova nella posizione giusta, stringere la vite.

La cintura Freedom non può essere regolata in lunghezza dal lato della fibbia poiché è studiata per un utilizzatore che non ha la mobilità per sistemare le cinghie. Il vantaggio della Freedom è che può essere usata anche da chi ha una funzione della mano molto limitata o nulla. La lunghezza fissa obbliga l'utilizzatore a sedersi nella posizione corretta per allacciare la cintura.

IT

Soloc Freedom - SFree Manuale d'uso




Aggiungere la prolunga al braccio FlexiFix

Se il braccio FlexiFix non è abbastanza lungo, è possibile aggiungere una prolunga di 120 mm a ogni lato.

La prolunga deve essere collegata al braccio FlexiFix in due punti usando i bulloni, le rondelle e i dadi forniti. Una rondella deve essere messa sotto la testa del bullone e l'altra prima del dado.

La prolunga può quindi essere agganciata alla carrozzina seguendo le istruzioni che precedono (v. sez. Montare i bracci Freedom sulla carrozzina).

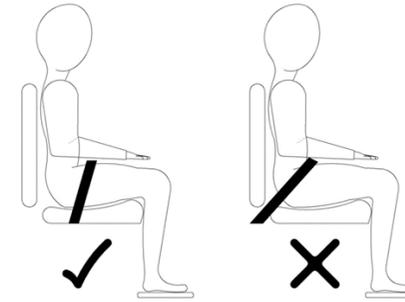

La cintura deve impedire al bacino di scivolare in avanti. A questo scopo, deve essere agganciata in modo da passare davanti ai grandi trocanteri come mostrato nella figura a sinistra.

Maggiori informazioni sull'aggancio e sulla posizione del supporto posturale sono disponibili nello standard BS 8625:2019

Sicura Houdini

Ogni fibbia Soloc è dotata di una sicura Houdini che permette, se serve, di bloccare l'unità in modo che l'utilizzatore non possa aprirla da solo.

La fibbia può essere bloccata inserendo sotto l'adesivo con il logo una vite che impedisce al pulsante o all'anello di sgancio di funzionare.

Per liberare un utilizzatore dalla cintura, è necessario mettere sulla fibbia il dispositivo di sgancio Houdini, che grazie a dei magneti in punti strategici sblocca il meccanismo interno. Questo sistema è più sicuro di altri e non può essere manomesso né sbloccato con strumenti diversi da quello previsto.

Assicurarsi di avere a portata di mano il dispositivo di sgancio Houdini in caso di emergenza. Può essere tenuto sullo schienale della carrozzina (fuori dalla portata dell'utilizzatore) o portato dall'assistente.